

Curera® Hemi Sittdyna

Sittdyna med specialdesign

Curera® Hemi är en tryckfördelande speciellt utformad dyna med mönsterskyddad design⁽¹⁾ och som passar för personer som har behov av att kunna sparka sig fram med rullstolen. Den är uppbyggd av en anatomisk formgjuten bas med inlägg av viskoelastiskt skum från ovansidan. För bättre rörlighet är dynan fasad i framkant och främre halvan nersänkt på en eller båda sidorna. Utrustad med sidostöd, bendelare och sittgrop ger dynan en stabil sits för personer som behöver extra stöd.

Den anatomiska och anpassade formen fördelar trycket mot lårens undersida, ger en bra sittposition, god avlastning för sittbensknölar och svanskota samt minskad risk för skjuvkrafter. Med urtag för ryggrör och rundad bakkant ger den även en bra passform i rullstolen. Sittkomforten hos Curera® Hemi är god och passar personer som sitter både längre och kortare tid.

Curera® Hemi går att få i tre varianter, nedsänkt på höger respektive vänster sida eller på båda sidor.



Curera® Hemi med standardöverdrag



Läs bruksanvisningen före användning av produkten.

TILLGÄNGLIGA ÖVERDRAG

Standardöverdrag

Följsamt material på ovansidan som motverkar glid. Undersida i antiglid.

Hygienöverdrag


Vätsketätt, ångpermeabelt överdrag som är elastiskt och följsamt. Undersidan i antiglid.

Överdrag Hätta

Tillverkat i 2-vägsstreck. Tyget har hög följsamhet och friktionsförmåga. Resår runt om.

Överdrag Delux

Polyesterplysch på utsidan och självventilerande material på insidan. Dragkedja på bakkanten.

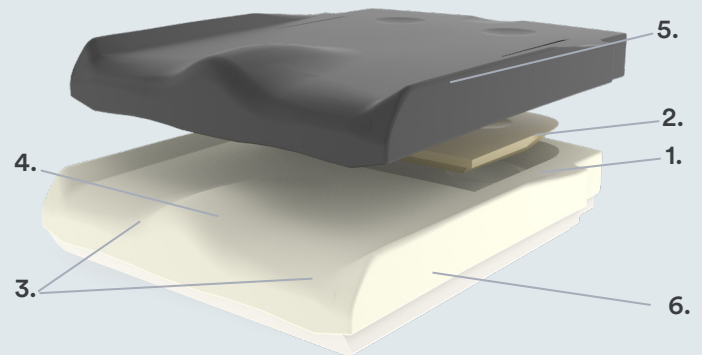

- | | |
|------------------------|------------------------|
| 1. SITTGROP | 4. BENDELARE |
| 2. URTAG FÖR SVANSKOTA | 5. VÄTESKETÄTT YTSKIKT |
| 3. URTAG FÖR BEN | 6. SIDOSTÖD |



(1) Mönsterskydd nr 79436.

Care of Sweden är registrerade varumärken för Care of Sweden AB. © Care of Sweden AB, 2025. Eftertryck förbjudes. Senast uppdaterad: 2025-04-28.

EGENSKAPER

- Anatomiskt formgjuten
- Främre halvan av dynan sänkt på en eller två sidor
- Enkel att rengöra

FAKTA

- Höjd: 5 cm
- Garanti: 2 år
- Material i dyna: Polyuretanskum, viskoelastiskt skum, vulkaniserat gummi
- Material i överdrag: Polyester och Polyuretan
- Klassificering: ISO-kod 122506-03 - Tryckfördelande
- Brand: SS-EN 1021-1, SS-EN 1021-2, ISO 7176-16

PASSFORMSGUIDE:

(Rekommenderad max brukarvikt i kg och tillgängliga standard storlekar. Fler storlekar går att beställa.

Vänligen kontakta vår kundtjänst.)

Bredd cm							
Djup cm	35	37	40	42	45	47	50
35	70		70	115			
40	70	70	115	130	130	130	150
45		70	115	130	130	130	150
50				130	130		150

OBS!!

Tänk på att mäta där pilarna visar.

